



Plán hygieny

Denně

Po každém / před každým pacientem

Ruce dezinfikovat, případně umýt

doplňky: všichni zaměstnanci, jejichž ruce by mohly být kontaminované

Instrumenty

dezinfikovat všechny kontaminované nástroje a nářadí, opláchnout, zabalit, vysterilizovat (dle potřeby) a poté pečlivě uschovat.

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Dezinfikovat pracovní plochu, nábytek a všechny pevné aparáty v okruhu 1,5 m na pracovním místě například:

- posuvný stůlek na nástroje
- křeslo pacienta (opěrka hlavy, opěradlo pro ruce)
- ruční a úhlové díly, turbínu, multifunkční stříkačky
- rukojeti celé jednotky včetně křesla, lampy a všech použitých zásuvek
- veškeré ovládací knoflíky
- plivátko
- násadce odsávací slin a odsávací hadice
- tubus rentgenu (rukojeť, spoušť) byl-li použit
- všechny použité malé přístroje, jako např. polymerizační lampu a jiné předměty (např. věci na psaní)

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Odsávací zařízení umýt, odsát vodu

Pracovní plochy v ordinaci dezinfikovat

Odpad odstranit

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Denně

Po ukončení práce

Odsávací zařízení

umýt (aspirovat dvěma litry čistého roztoku)

Umývadlo, armatury, podlahu v ordinaci, steri-místnosti, čekárnu a WC umýt a dezinfikovat

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Týdně

Po ukončení práce

Všechny povrchové plochy jako

- rukojeti zásuvek, autoklávu a sanitární zařízení
- kliky od dveří
- telefonní sluchátko, komunikační zařízení

čistit a dezinfikovat

RTG vyvolávač filmů dezinfikovat zvenčí

Lázně pro nástroje (včetně UZ čističky a vany na otisky) vyměnit roztok (doporučuje se denní výměna)

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Periodicky

Měsíčně (nejméně 1 až 2-krát)

Autokláv

zkontrolovat funkčnost autoklávu v souladu s předpisy

Často používané zásuvky umýt a vydezinfikovat zevnitř

Čtvrtročně

Chladničku zevnitř a zvenčí dezinfikovat (dle potřeby i častěji)

Půlročně

Sterilně zabalené instrumenty zavařit do nových sterilních balení, označit datem a vysterilizovat

doplňky: odpovědná zaměstnankyně:

Bezpečnostní oděv

- při každém ošetření používat zásadně jednorázové rukavice
- používat běžné rukavice pro domácnost v infekční (červené) zóně ve steri-místnosti
- používat ochranné brýle a roušku na ústa při práci, kde může dojít k uvolňování aerosolů.
- Bezpečnostní oděv měnit každý den!

doplňky:

Manipulace s odpadem

- špičaté, ostré a rozbitné předměty vložit do uzavíratelného, pro tekutiny nepropustného speciálního kontejneru.
- odpad, obsahující amalgám vložit do pevných, zápach absorbujících nádob
- chemikálie pro rentgen a snímky odstranit ve speciální nádobě (dodržovat úřední předpisy)

doplňky:

zmocněnec pro hygienu: toxikologický institut; nemocnice; jiné:

distributor:

Upozornění k použití



RUCE

Péče, dezinfekce

1. umýt tekutým mýdlem před začátkem práce i ukončením práce a při přerušení práce nebo při viditelném znečištění
2. vysušit jednorázovým ručníkem
3. dezinfikovat před a po každém ošetření, natažení rukavic k vyšetření a při opouštění operačního sálu nebo dle potřeby
4. několikrát denně aplikovat krém na ruce


doplňky:



Doporučené produkty

OROLIN® Lotion

OROSEPT® Solution
OROMED® Gel
OROCREME

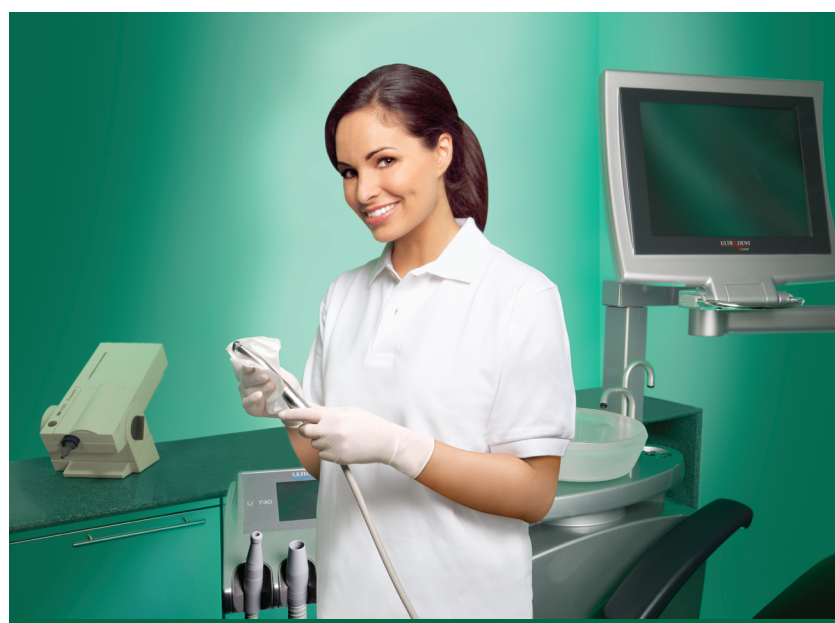

PLOCHY

Malé povrchové plochy (např. posuvný stůlek na nástroje, malé přístroje, rukojeti, ovládací elementy, kliky u dveří)

dezinfekce nastříkáním a utřením

ujistěte se, že všechny plochy jsou kompletně vlhké

Podlahy, velké pracovní plochy a sanitární zařízení

dezinfekce vlhkým hadrem (mopem)
ujistěte se, že všechny plochy jsou kompletně vlhké

doplňky:



Doporučené produkty

ISORAPID® Spray
ISORAPID® Liquid
DENTIRO® Wipes
ISORAPID® XXL Wipes

OROLIN® OP-Forte AF
ISORAPID® Floor



NÁSTROJE A NÁŘADÍ

Nástroje dezinfekce, sterilizace

1. okamžitě po použití vložit do dezinfekční lázně nebo myčky
2. opláchnout vodou, zkontrolovat čistotu (popř. znovu umýt), vysušit, v případě potřeby naolejovat, zkontrolovat funkčnost a zapojení
3. extrakční kleště a jiné chirurgické nástroje sterilně zabalit, opatřit datem a zavařit
4. sterilizovat v autoklávu (jen termorezistentní nástroje)

Vrtáky, gummy k leštění, tělesa k leštění, ZR-kartáče

1. okamžitě po použití vložit do dezinfekční lázně nebo myčky
2. eventuální zbytky odstranit mechanicky, popř. ošetření zopakovat
3. vrtáky neumývat! Jen položit na papírovou utěrku a nechat vyschnout
4. jiné díly umýt vodou, zkontrolovat čistotu, vysušit (v případě potřeby vysterilizovat), uskladnit

Nástroje zubního lékaře (např. technické kleště)

1. dezinfekce utřením
2. při kontaminaci se slinami nebo krví, vydezinfikovat v lázni nebo myčce jako u nástrojů
3. sterilizovat pouze, pokud jsou termorezistentní
4. kleště dle potřeby namazat olejem

Doporučené produkty

OROCID-MULTISEPT® Plus
OROLIN® Perasept

OROLIN® Burbath

ISORAPID® Spray
ISORAPID® Liquid
DENTIRO® Sensitive
DENTIRO® Wipes
ISORAPID® XXL Wipes

Výměna lázně

vyměnit pracovní roztoky týdně nebo při znečištění. Dezinfekci založenou na kyselině peroctové měnit denně.

doplňky:



ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ & OTISKY

Odsávací zařízení

po každém pacientovi propláchnout dostatkem vody po ukončení práce propláchnout čistícím prostředkem, dezinfikovat minimálně jednou nebo dvakrát týdně.

Otisky

dezinfekce a čištění v dezinfekční lázni

dezinfekce sprejem

doplňky:



Doporučené produkty

ORO CLEAN® Liquid
ORO CLEAN® Plus

ASEPTOPRINT® Liquid

ASEPTOPRINT® Spray